


Instructions d'utilisation

Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

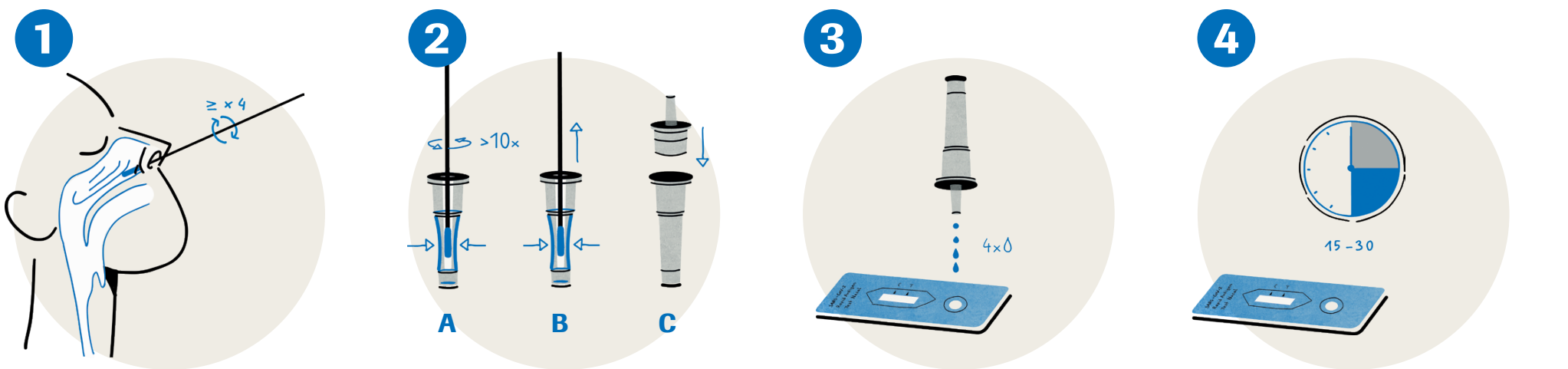

Prélèvement de l'échantillon

Avant de réaliser le test, veuillez vous laver les mains. Retirez l'écouvillon de l'emballage en veillant à ne le toucher que par son manche. Penchez légèrement la tête en arrière. Introduisez l'écouvillon dans une narine. Poussez lentement l'écouvillon vers le fond sur environ 2 cm (parallèlement au palais) jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Ce faisant, n'exercez aucune pression. Faites tourner l'écouvillon 4 fois (environ 15 secondes en tout) dans la narine, contre la paroi nasale, puis retirez-le du nez. Recommencez l'opération avec le même écouvillon dans l'autre narine.

Extraction de l'échantillon

Placez l'écouvillon dans un tube contenant un tampon d'extraction. Pressez la zone inférieure du tube et faites tourner l'écouvillon dans un sens puis dans l'autre plus de 10 fois. Continuez à presser les côtés du tube en retirant l'écouvillon afin de l'essorer au maximum. Pressez fermement le bouchon distributeur sur le tube.

Application de l'échantillon extrait

Placez le dispositif d'analyse sur une surface plane. Tenez le tube verticalement au-dessus du champ rond marqué (et non de la fenêtre de résultat rectangulaire). Déposez exactement 4 gouttes dans le champ. Si nécessaire, pressez légèrement le tube pour cela. Note: vous pouvez continuer le test même si vous avez accidentellement appliqué 5 gouttes.


Lecture du résultat

Réglez le chronomètre et lisez le résultat du test après 15 à 30 minutes.



Si le résultat du test est lu après plus de 30 minutes, le résultat peut être faux.


Informations concernant le kit de test

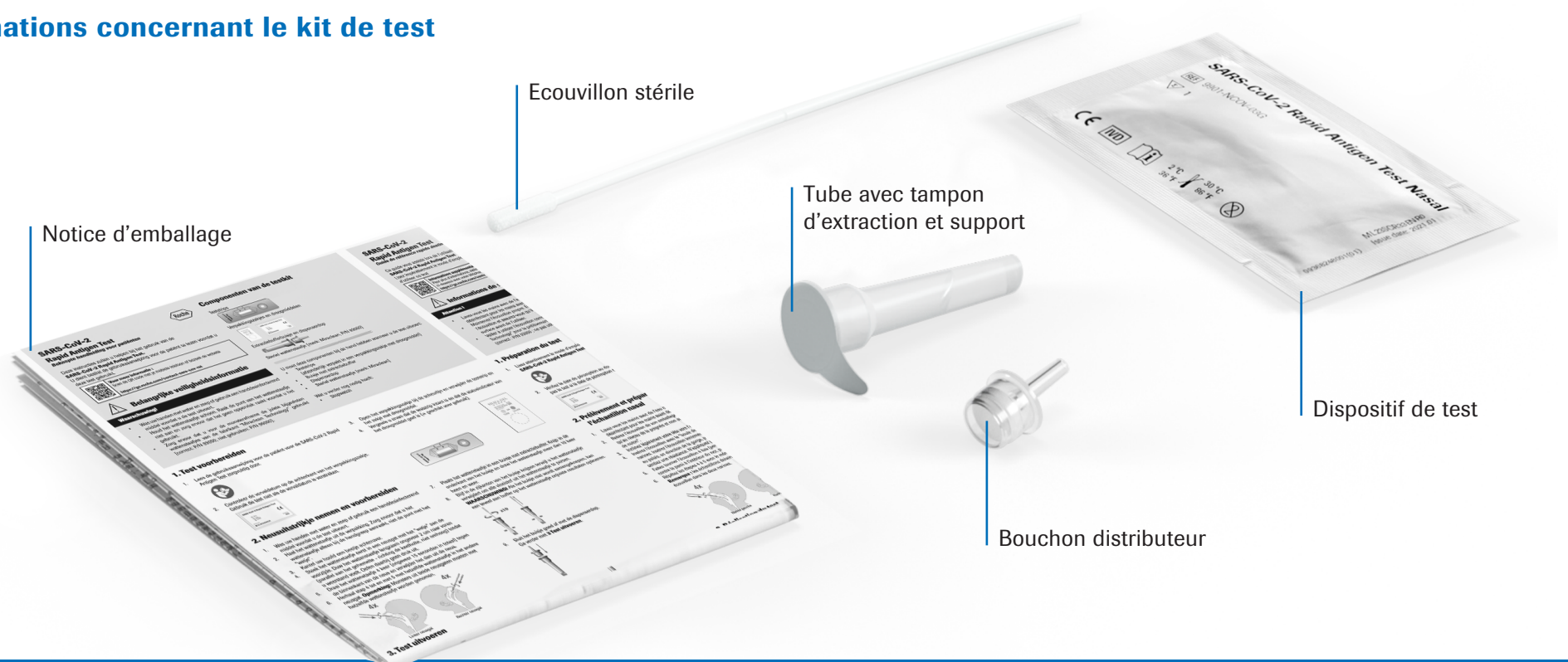

go.roche.com/selftest


Handhabung

Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

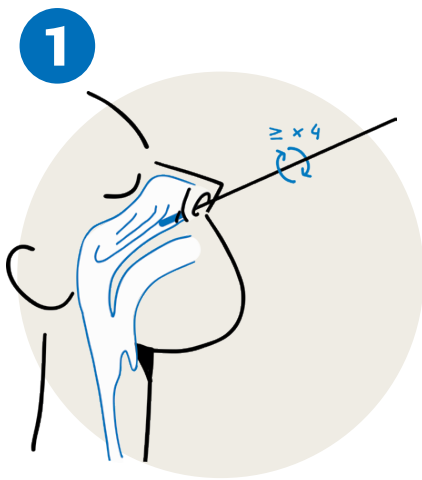


ABSTRICH ENTNEHMEN

Waschen Sie sich vor der Testdurchführung die Hände. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung und achten Sie dabei darauf den Tupfer nur am Griff zu berühren. Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten. Führen Sie den Tupfer in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. 2 cm nach hinten (parallel zum Gaumen), bis Sie einen Widerstand spüren. Üben Sie dabei keinen Druck aus. Drehen Sie den Tupfer 4 Mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase. Wiederholen Sie dies mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch.

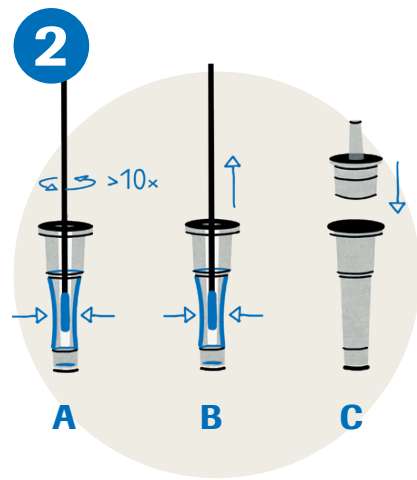


AUFLÖSEN DER PROBE (Extraktionspuffer)

Stecken Sie den Abstrichtupfer in ein Röhrchen mit Extraktionspuffer. Drücken Sie das Röhrchen im unteren Bereich zusammen und drehen Sie den Tupfer mehr als 10-mal hin und her. Drücken Sie die Seiten des Röhrchens weiterhin zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen, um die gesamte Flüssigkeit aus dem Tupfer zu pressen. Drücken Sie die Spenderkappe fest auf das Röhrchen um es ab zu schließen.

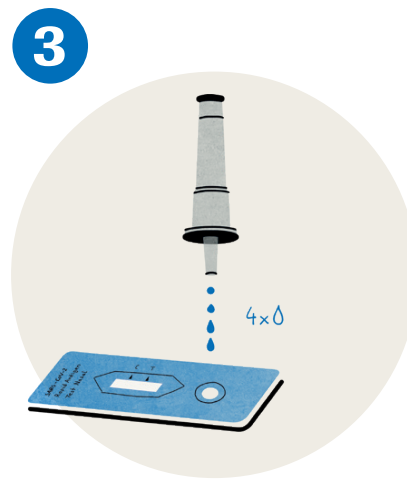

AUFTRAGEN DER GELÖSTEN PROBE

Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche. Halten Sie das Röhrchen vertikal über das runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergebnisfenster). Tropfen Sie genau 4 Tropfen auf das Feld. Drücken Sie dafür, falls nötig, das Röhrchen leicht zusammen. Hinweis: Sie können den Test auch fortsetzen, wenn Sie versehentlich 5 Tropfen aufgetragen haben.

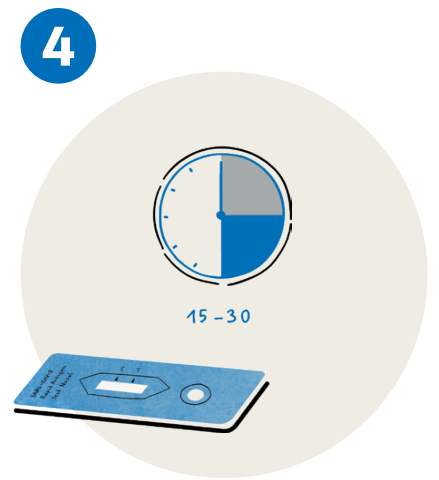

ERGEBNIS ABLESEN


Stellen Sie sich einen Wecker und lesen Sie das Testergebnis nach 15-30 Minuten ab.



Wenn das Testergebnis nach mehr als 30 Minuten abgelesen wird, kann das Ergebnis falsch sein.

Informationen zum Testkit


Das Kit ist gebrauchsbereit und enthält alles, was für die Durchführung des Tests benötigt wird.

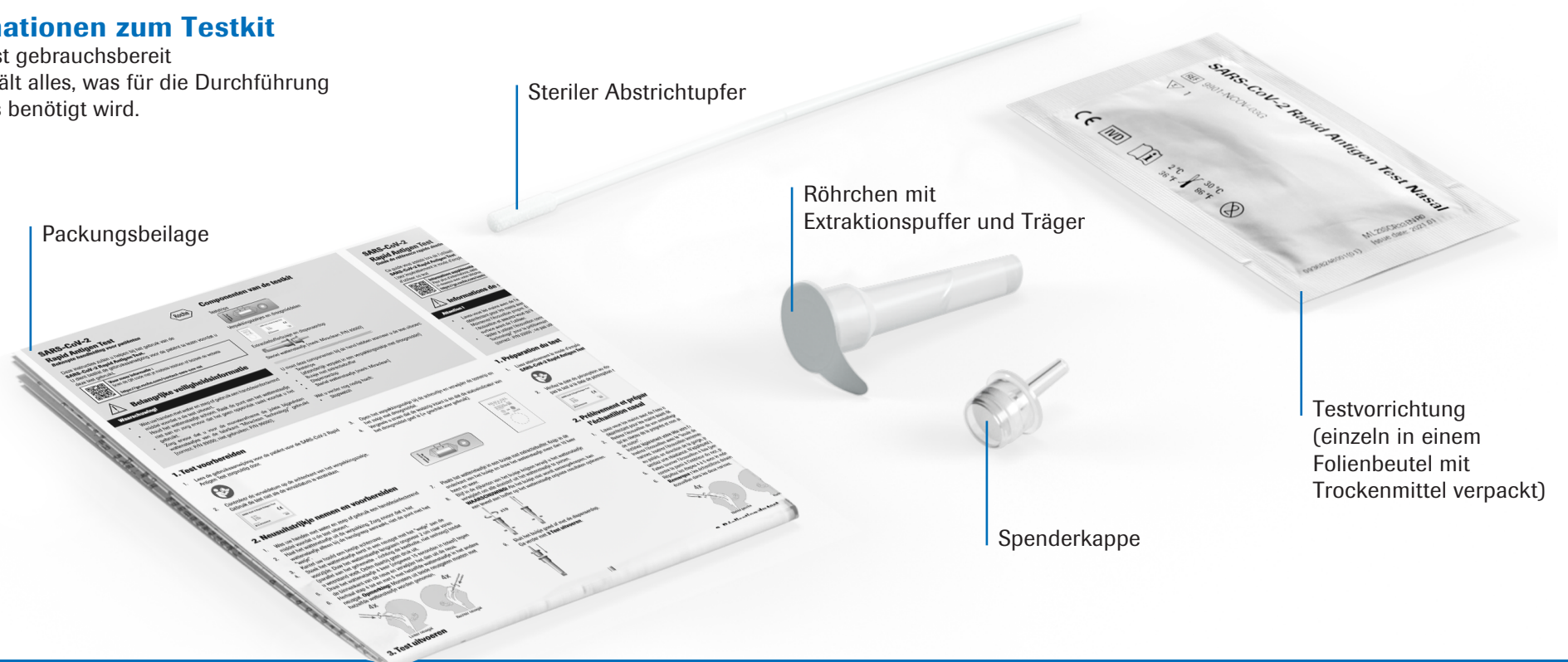

go.roche.com/selftest

Gebruikershandleiding

Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

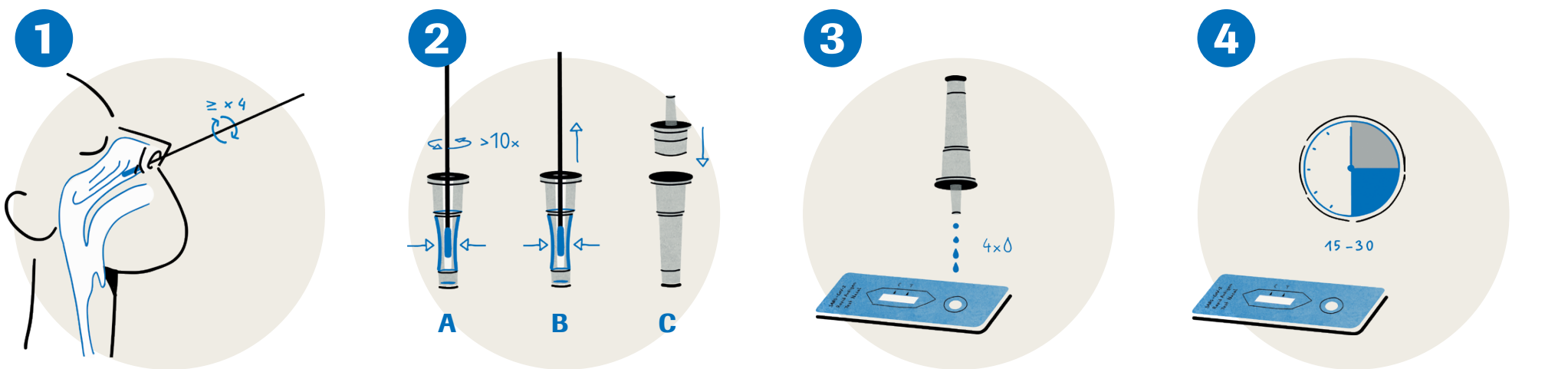

Neusuitstrijkje nemen en voorbereiden

1. Was uw handen met water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel voordat u de test uitvoert.
2. Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Zorg ervoor dat u het wattenstaafje alleen bij de handgreep aanraakt, niet de punt met het "watje".
3. Kantel uw hoofd een beetje achterover.
4. Steek het wattenstaafje eerst in een neusgat met het "watje" aan de voorzijde. Duw het wattenstaafje langzaam ongeveer 2 cm naar voren (parallel aan het gehemelte - richting de keelholte, niet omhoog) totdat u weerstand voelt. Oefen daarbij geen druk uit.
5. Draai het wattenstaafje 4 keer (ongeveer 15 seconden in totaal) tegen de binnenkant van de neus en verwijder het dan uit de neus.
6. Herhaal stap 4 tot en met 5 met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat. Opmerking: Monsters uit beide neusgaten moeten met hetzelfde wattenstaafje worden genomen.

Het monster oplossen in de extractiebuffer

1. Plaats het wattenstaafje in een buisje met extractiebuffer. Knijp in de onderkant van het buisje en draai het wattenstaafje meer dan 10 keer heen en weer.
2. Blijf in de zijanten van het buisje knijpen terwijl u het wattenstaafje verwijdert om alle vloeistof uit het wattenstaafje te persen. **WAARSCHUWING!** Als het buisje niet wordt samengeknepen, kan een teveel aan buffer op het wattenstaafje onjuiste resultaten opleveren.
3. Sluit het buisje goed af met de druppelaardop. Ga verder met 3

Aanbrengen van het opgeloste monster

1. Leg de teststrip op een vlakke ondergrond.
2. Houd het buisje verticaal boven het ronde gemarkeerde veld (niet het rechthoekige resultaatvenster).
3. Plaats precies 4 druppels op het veld. Knijp hiervoor zo nodig voorzichtig in het buisje.

Opmerking: u kunt ook doorgaan met de test als u per ongeluk 5 druppels aanbrengt.

Het resultaat aflezen


Schakel de stopwatch in en lees het testresultaat na 15 tot 30 minuten af.



WAARSCHUWING! Als het testresultaat na meer dan 30 minuten wordt afgelezen, is het resultaat mogelijk onjuist

Informatie over de testkit

De kit is klaar voor gebruik en bevat alles wat nodig is om de test uit te voeren.

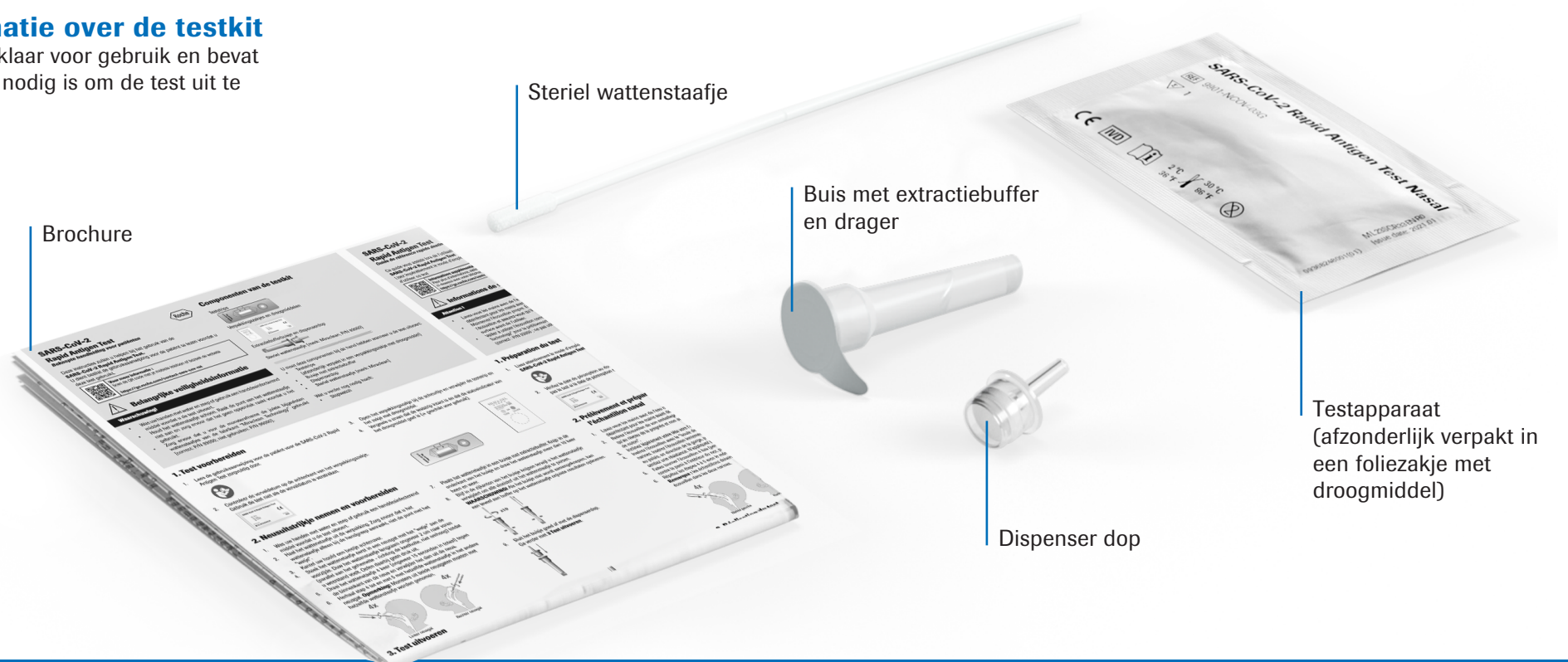

go.roche.com/selftest